

L'analyse est effectuée uniquement **en période épidémique**.


## MATERIEL

- Kit de prélèvement « KIT GRIPPE » (écouvillon stérile et tube en plastique contenant un milieu de transport virus).
- Ce kit est fourni sur demande par le laboratoire (**Commande de matériel au laboratoire PRE-EN-008**). Il est conservé à température ambiante.
- Gants de soin


## TECHNIQUE

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription médicale.
- Informer le patient et le rassurer.
- Effectuer une friction hygiénique des mains (**MO.HY.NDS.094**) et mettre des gants de soins.


**1**  
Ouvrez l'emballage qui contient l'écouvillon et le tube de milieu de transport. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.

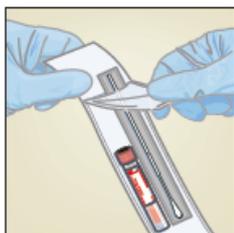

**2**  
Ouvrez l'emballage et sortez l'écouvillon, en prenant soin de ne pas mettre son extrémité en contact avec une surface.

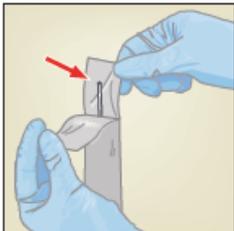

**3**  
Tenez l'écouvillon dans votre main, en pinçant au milieu de la tige de l'écouvillon sur la ligne de cassure.

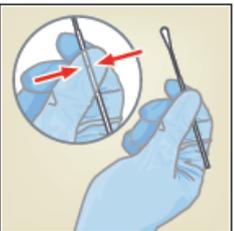

**4**  
Tournez l'écouvillon contre la paroi interne de la narine pendant 3 secondes en exerçant une pression avec le doigt sur l'extérieur de la narine.



N'insérez pas les écouvillons de plus de 1 à 1,5 cm.


**5** Répétez l'étape 4 dans l'autre narine avec le même écouvillon.  
Pour éviter de contaminer l'échantillon, ne mettez pas l'extrémité de l'écouvillon en contact avec quoi que ce soit après avoir prélevé l'échantillon.




**6** Retirez le bouchon du tube. Insérez l'écouvillon dans le milieu de transport.



**7** Cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube au niveau de la ligne de cassure.  
Évitez d'éclabousser le contenu sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.

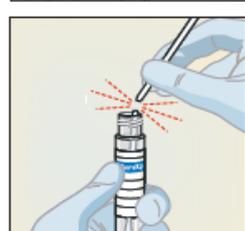

**8** Remettez le bouchon sur le tube et vissez-le bien.

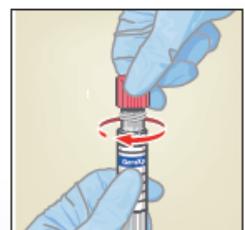

- Identifier le tube avec une étiquette patient. Le déposer dans un sachet de transport.
- Retirer et éliminer les gants.
- Effectuer une friction hygiénique des mains.
- Identifier et renseigner le bon de demande. L'insérer dans le compartiment extérieur du sachet.
- Transmettre **rapidement** le prélèvement au laboratoire (**PRE-PT-003**) : voir la fiche analyse correspondant à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.